




*Guía de adquisición de mamografías para el uso de
quantusMM*

FECHA: 26.09.2022

NÚMERO DE EDICIÓN: 1.0

REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN Y SUBIDA DE IMÁGENES

- Las imágenes deben ser formato DICOM.
- La web requiere la subida de dos imágenes por mama correspondientes a la perspectiva Craneo-Caudal (CC) y a la perspectiva Lateral Medio Oblicua (MLO).
- La web permite el análisis una o dos mamas conjuntamente (2 imágenes o 4 imágenes).
- Todas las imágenes de un mismo espécimen (paciente) deben tener el mismo prefijo para poder realizar el análisis agrupado, siendo el sufijo el identificador de la lateralidad y de la perspectiva:
 - _1: IZDA CC
 - _2: DCHA CC,
 - _3: IZDA MLO,
 - _4: DCHA MLO.

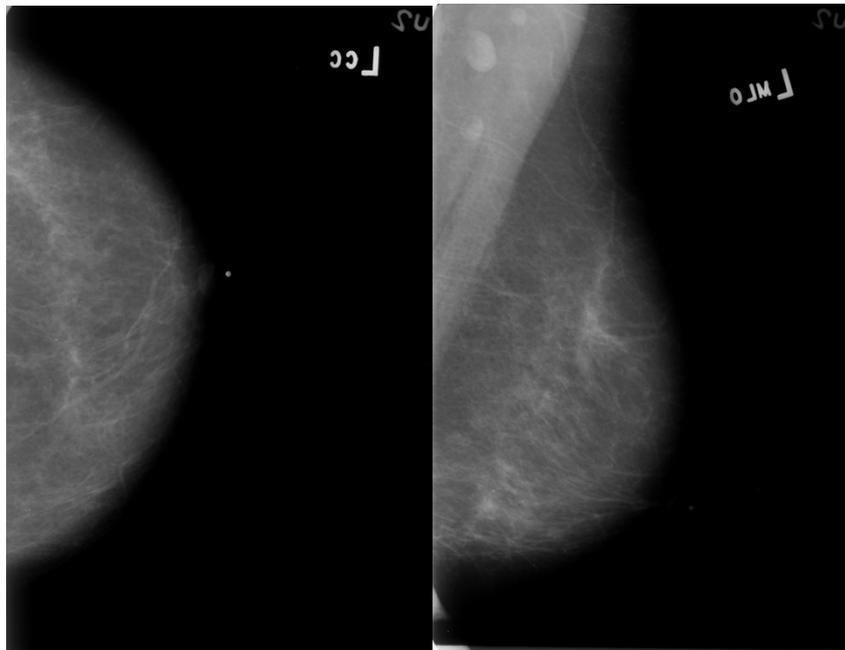

Vista CC

Vista MLO

Imágenes tomadas del dataset público DDSM. (<https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/CBIS-DDSM>)

CONTACTO

Para más información contáctenos en:

support@quantusMM.org

o visite:

www.quantussMM.org